



Test de grossesse

Pour l'autodiagnostic

PRINCIPE

Lire attentivement les instructions avant l'utilisation de ce test. Le test de grossesse **MedicAid**® est un test de détection de la grossesse sous jet d'urine, conçu pour un autodiagnostic rapide. La sensibilité de ce test (25 mIU/ml) permet de détecter une grossesse en 5 minutes de manière fiable (>99%) et ceci dès le premier jour présumé des règles.

PRÉCAUTIONS

- Veuillez lire toutes les informations de cette notice avant d'effectuer le test.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur la pochette en aluminium.
 - Conserver dans un endroit sec à des températures comprises entre 2 et 30°C. Ne pas congeler.
 - Ne pas utiliser le test si la pochette est déchirée ou endommagée.
 - Tenir hors de portée des enfants.
 - Réservé au diagnostic in vitro. Usage externe uniquement.
 - N'ouvrir la pochette du test que lorsque vous êtes prête à l'utiliser.
 - Les tests de grossesse usagés doivent être mis au rebut dans le respect des réglementations en vigueur.

MATÉRIEL FOURNI

Un sachet aluminium contenant 1 test et 1 sachet dessicant, 1 mode d'emploi.

QUAND FAIRE LE TEST ?

Le test est réalisable à tout moment de la journée, les urines du matin sont néanmoins optimales en raison de leur plus forte concentration en hCG. Le test du matin doit être fait avant toute prise de boisson.

INSTRUCTIONS

- Sortez le test de grossesse de la pochette en aluminium et utilisez-le dans l'heure qui suit.
- Retirez le capuchon du test de grossesse, puis dirigez le jet d'urine sur l'embout ou tenez-le au moins 15 secondes dans un échantillon d'urine recueilli dans un récipient propre. Faites bien attention à mettre en contact avec l'urine les 5 trous de la partie plastique du test de grossesse.
- Remplacez le capuchon sur l'embout, posez le produit sur une surface propre et stable et mettez immédiatement le chronomètre en marche.
- Le résultat doit être lu au bout de trois minutes et ne doit plus être interprété après 10 minutes.

LECTURE DES RÉSULTATS

ENCEINTE


Deux bandes colorées apparaissent. L'une des bandes doit se trouver dans la zone de contrôle (C), et l'autre dans la zone de test (T). Le fait que l'une des bandes soit plus claire que l'autre n'a pas d'incidence sur les résultats. Cela signifie que vous êtes probablement enceinte.

PAS ENCEINTE

Une bande colorée apparaît dans la zone de contrôle (C). Aucune bande n'apparaît dans la zone de test (T). Cela signifie que vous n'êtes probablement pas enceinte.

RÉSULTAT NON VALABLE

Le résultat n'est pas valable lorsqu'aucune bande colorée n'apparaît dans la zone de contrôle (C), même si une bande apparaît dans la zone de test (T). Répétez la procédure avec un nouveau test de grossesse.

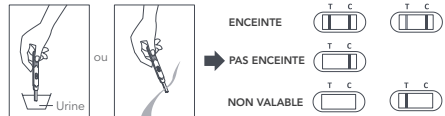

RESTRICTIONS

- Les médicaments qui contiennent de l'hCG (tels que le Pregnyl, le Profasi, le Pergonal ou l'APL) peuvent entraîner des résultats faussement positifs.

L'alcool, les contraceptifs oraux, les analgésiques, les antibiotiques ou les thérapies hormonales ne contenant pas d'hCG ne devraient pas affecter le résultat du test.

- En dehors de la grossesse, plusieurs problèmes médicaux, tels qu'un kyste de l'ovaire ou une grossesse extra-utérine (développée en dehors de l'utérus), peuvent provoquer une augmentation des concentrations d'hCG et entraîner un résultat faussement positif.
- Ne jamais prendre de décision médicale sans consulter.
- Un résultat faussement négatif peut apparaître si la concentration en hormone hCG est inférieure au seuil de sensibilité du test.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Comment fonctionne le test de grossesse?

Le test de grossesse rapide **MedicAid**® détecte une hormone dans votre urine que votre organisme produit pendant la grossesse (hCG - gonadotrophine chorionique). La quantité d'hormone hCG augmente au fur et à mesure de la grossesse.

2. Au bout de combien de temps dois-je utiliser le test lorsque je pense que je pourrais être enceinte ?

Vous pouvez utiliser le test de grossesse dès le lendemain de la date présumée de vos règles. Vous pouvez effectuer ce test à n'importe quel moment de la journée. Cependant, si vous êtes enceinte, sachez que la première urine du matin concentre le plus d'hormones hCG.

3. Dois-je faire le test avec la première urine du matin?

Bien que vous puissiez effectuer ce test à n'importe quel moment de la journée, votre première urine du matin est généralement la plus concentrée de la journée et celle qui contient donc le plus d'hCG.

4. Quel est le degré de précision du test?

Une étude clinique comparative a été menée entre le test de grossesse **MedicAid**® et un test urinaire hCG de référence. Ce test de référence est le test de contrôle qui permet d'évaluer la fiabilité, la précision et la sensibilité d'un test de grossesse urinaire. Ainsi le test **MedicAid**® et le test de référence ont identifié les mêmes résultats, sur 413 échantillons, les tests ont identifié 117 résultats positifs et 296 résultats négatifs. Comparativement au test de référence, la fiabilité globale du test de grossesse **MedicAid**® est supérieure à 99%.

5. Quel est le degré de sensibilité du test?

Le test de grossesse **MedicAid**® détecte l'hCG dans l'urine à une concentration égale ou supérieure à 25 mIU/ml. Ce test est conforme à la norme internationale de l'OMS. L'ajout de LH (300 mIU/ml), FSH (1 000 mIU/ml) et TSH (1 000 µIU/ml) à des échantillons négatifs (0 mIU/ml de hCG) et positifs (25 mIU/ml de hCG) n'entraînent pas de réaction croisée.

6. Que dois-je faire si le résultat indique que je suis enceinte?

Cela signifie que votre urine contient de l'hCG et que vous êtes probablement enceinte. Consultez votre médecin pour confirmer votre grossesse et discuter ensemble des étapes à suivre.

7. Comment puis-je être sûre que j'ai effectué le test correctement?

L'apparition d'une bande colorée dans la zone de contrôle (C) vous indique que vous avez réalisé le test correctement et qu'une quantité suffisante d'urine a été absorbée.

8. Que dois-je faire si le résultat indique que je ne suis pas enceinte?

Cela signifie que l'hCG n'a pas été détectée dans votre urine et que vous n'êtes probablement pas enceinte. Si vos règles ne se présentent pas une semaine après la date prévue, répétez la procédure avec un nouveau test de grossesse. Si vous obtenez le même résultat après ce nouveau test et que vos règles n'arrivent toujours pas, vous devriez consulter votre médecin.

INDEX DES SYMBOLES

	Attention, consulter le mode d'emploi		Nombre de tests par coffret
	Réservé au diagnostic in vitro		Utiliser avant le
	Conservé entre 2° et 30°C		Numéro de lot
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Fabricant
	Ne pas réutiliser		Numéro Catalogue

BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

REF 854972 V4 - 05/2017



CE 0123



Test di gravidanza

Per autoanalisi

PRINCIPIO

Il test rapido di gravidanza **MedicAid**® è un test immunologico a flusso laterale monofase con prelievo del mito intermedio per il rilevamento qualitativo della gonadotropina corionica umana (hCG) nell'urina per individuare la presenza di una gravidanza. Il test, impiega una combinazione di anticorpi tra cui l'anticorpo monoclonale anti-hCG per individuare in modo selettivo livelli elevati di hCG. Imbevendo il bastoncino idrofilo di urina compaiono delle bande colorate che indicano il risultato del test.

PRECAUZIONI

- Leggere tutte le informazioni riportate nel presente foglietto illustrativo prima di eseguire il test.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sul sachetto di alluminio.
 - Conservare in luogo asciutto a 2-30°C. Non riporre nel congelatore.
 - Non utilizzare se il sachetto è usurato o danneggiato.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Per diagnosi in vitro. Non tenere all'interno.
 - Non aprire il sachetto in alluminio del test **MedicAid**® se non si esegue immediatamente.
 - Il test utilizzato deve essere smaltito in conformità alle leggi locali.

MATERIALE FORNITO

Un sachetto di alluminio contenente 1 test e 1 sachetto sale 1 manuale.

ISTRUZIONI

- Rimuovere il test dal sachetto di alluminio ed eseguirlo entro un'ora.
- Rimuovere il cappuccio, quindi dirigere il flusso di urina direttamente sul bastoncino o immergere quest'ultimo in un contenitore pulito contenente il campione di urina per almeno 15 secondi. Fare attenzione a mettere bene in contatto l'urina con il lato del tampone munito di 5 fori.
- Rimettere il cappuccio sul bastoncino, poggiarlo su una superficie pulita e stabile e avviare il timer immediatamente.
- Leggere il risultato dopo 3 minuti; non interpretarlo se sono passati 10 minuti.

LETTURE DEI RISULTATI

INCINTA


Compaiono due bande colorate distinte. Una banda deve trovarsi nella zona di controllo (C) e l'altra nella zona reattiva (T). Una banda può essere più chiara dell'altra; non devono corrispondere. Ciò significa che si è probabilmente incinta.

NON INCINTA

Una banda colorata compare nella zona di controllo (C). Non compare nessuna banda nella zona reattiva (T). Ciò significa che probabilmente non si è incinta.

NON VALIDO

Il risultato non è da considerarsi valido se non compare alcuna banda colorata nella zona di controllo (C), anche se compare una banda nella zona reattiva (T). Sarà necessario ripetere il test con un nuovo kit.

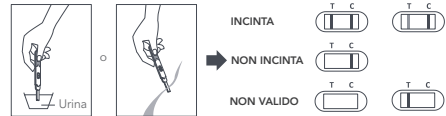

LIMITI

- Farmaci contenenti hCG (quali Pregnyl, Profasi, Personal, APL) possono produrre un falso positivo. Alcool, contraccettivi orali, analgesici, antibiotici terapie ormonali che non contengono hCG non influiscono sul risultato del test.
- Alcuni disturbi quali cisti ovariche o gravidanze ectopiche (extrauterine), possono far registrare livelli elevati di hCG dando così un falso positivo.
- Consultare il medico curante prima di prendere qualsiasi decisione.

4. Risultati falsi negativi possono verificarsi quando i livelli di hCG sono inferiori al livello di sensibilità del test.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Come funziona il test?

Il test rapido di gravidanza **MedicAid**®, rileva la presenza di un ormone nelle urine che il corpo produce durante la gravidanza (hCG - gonadotropina corionica umana). Il livello di questo ormone aumenta nel corso della gravidanza.

2. Dopo quanto posso eseguire il test di gravidanza?

È possibile fare il test delle urine dal primo giorno di mancato ciclo. Il test può essere eseguito in qualsiasi momento del giorno, tuttavia, se si è incinta, l'urina della mattina contiene la maggior parte dell'ormone della gravidanza.

3. Devo effettuare il test con la prima urine del mattino?

Anche se il test può essere effettuato in qualsiasi ora del giorno, la prima urina del mattino contiene una maggiore concentrazione di hCG.

4. Quanto è accurato il test?

È stata effettuata una valutazione clinica che ha messo a confronto i risultati ottenuti con il Test rapido di gravidanza **MedicAid**® e quelli ottenuti con un altro test disponibile in commercio del tipo su membrana. Lo studio clinico comprendeva 413 campioni di urina: entrambi i test hanno riportato 117 risultati positive e 296 negativi. I risultati hanno dimostrato un'accuratezza complessiva del Test rapido di gravidanza **MedicAid**® superiore al 99% rispetto al test su membrana.

5. Quanto è sensibile il test?

Il Test rapido di gravidanza **MedicAid**® rileva l'hCG nelle urine ad una concentrazione di 25 mIU/mL o superiore. Il test è stato standardizzato con gli Standard Internazionali dell'OMS. L'aggiunta di LH (300 mIU/mL), FSH (1.000 mIU/mL), e TSH (1.000 µIU/mL) ai campioni negativi (0 mIU/mL hCG) e positivi (25 mIU/mL hCG) non ha mostrato una cross-reattività.

6. Cosa devo fare se il risultato indica che sono incinta?

In questo caso l'urina contiene hCG e si è probabilmente incinta. Prendere appuntamento con il medico curante per avere una conferma della gravidanza e discutere sul da farsi.

7. Come posso sapere se il test è stato eseguito correttamente?

La comparsa di una banda colorata nella zona di controllo (C) indica che la procedura è stata seguita correttamente e che è stata assorbita la corretta quantità di urina.

8. Cosa devo fare se il risultato indica che non sono incinta?

In questo caso non è stato rilevato alcun livello di hCG nelle urine e probabilmente non si è incinta. Se il ciclo non si presenta entro una settimana dalla data in cui si sarebbe dovuto presentare, ripetere il test utilizzando un nuovo kit. Se si ottiene lo stesso risultato dopo aver ripetuto il test ma il ciclo è ancora assente, consultare il medico.

INDICE DEI SIMBOLI

	Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso		Test per kit
	Solo per uso diagnostico in vitro		Data di scadenza
	Conservare a 2-30°C		Numero lotto
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata		Rappresentante autorizzato
	Non riutilizzare		Catalogo #

BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

REF 854972 V4 - 05/2017



CE 0123



Zwangerschapstest

Voor de zelf-diagnose

PRINCIPE

HCG Pregnancy Rapid Test MedicAid® is een snelle, immunologische eenstaps test met laterale flow in midstreamformaat, voor de kwalitatieve detectie van humaan chorion gonadotropine (hCG) in urine als hulp bij de detectie van een zwangerschap. De test maakt gebruik van een combinatie van antilichamen, met onder meer een monoklonaal hCG-antilichaam voor de selectieve detectie van hoge hCG-niveaus. De test wordt uitgevoerd door het aanbrengen van urine op het hydrofiele staafje, en het resultaat wordt verkregen met de gekleurde lijnen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Niet gebruiken na de vervaldatum die is afgedrukt op het foliezakje.
- Bewaren in een droge ruimte op 2-30°C. Niet invriezen.
- Test niet gebruiken als het zakje gescheurd of beschadigd is.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Voor in-vitro diagnostisch gebruik. Mag niet worden ingenomen.
- Open het het midstream foliezakje van de test niet tot u klaar bent om de test te starten.
- De gebruikte test midstream moet weggegooid worden volgens de lokale voorschriften.

GELEVERDE MATERIALEN

1 folieverpakking bevat 1 test en 1 handleiding, 1 gebruiksaanwijzing.

INSTRUCTIES

1. Verwijder de midstream uit het foliezakje en voer de test onmiddellijk uit, binnen het uur.
2. Trek het kapje van de midstream omlaag, en urineer erop, of plaats de MedicAid® gedurende minstens 15 seconden in een urinemonster in een schone beker. Zorg ervoor de urine in contact te brengen met de van 5 gaten voorziene zijde van de strip.
3. Dek het kapje op de test midstream af, leg de producten op een schone en stabiele tafel en start de timer onmiddellijk.
4. Lees het resultaat af na 3 minuten; interpreteer het resultaat niet na 10 minuten.

DE RESULTATEN AFLEZEN

ZWANGER

Er verschijnen twee verschillende gekleurde lijnen. Eén lijn moet in het controlelijngedebied (C) liggen, en de andere lijn moet in het testlijngedebied (T) liggen. Eén lijn mag lichter zijn dan de andere; ze moeten niet overeenkomen. Dit betekent dat u waarschijnlijk zwanger bent.

NIET ZWANGER

Er verschijnt één gekleurde lijn in het controlelijngedebied (C). Er verschijnt geen lijn in het testlijngedebied (T). Dit betekent dat u waarschijnlijk niet zwanger bent.

ONGELDIG

Het resultaat is ongeldig als er geen gekleurde lijn verschijnt in het controlelijngedebied (C), zelfs als er een lijn verschijnt in het testlijngedebied (T). U moet de test herhalen met een nieuwe test MedicAid®.



BEPERKINGEN

1. Geneesmiddelen die hCG bevatten (zoals Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) kunnen ook een vals positief resultaat geven. Alcohol, orale contraceptiva, pijnstillers, antibiotica of hormonale therapieën die geen hCG bevatten hebben normaal gezien geen invloed op de test.

2. Een aantal andere medische omstandigheden dan de zwangerschap, zoals ovariumcyste of extra-uteriene graviditeit (buitenbaarmoederlijke zwangerschap) kunnen leiden tot hogere hCG-niveaus, waardoor mogelijk een vals positief resultaat verkregen wordt.
3. Raadpleeg uw arts voor u enige medische beslissingen neemt.
4. Vals negatieve resultaten kunnen optreden wanneer de niveau van hCG onder het gevoeligheidsniveau van de test.

EXTRA INFORMATIE

1. Hoe werkt deze test MedicAid®?

HCG Pregnancy Rapid Test MedicAid® detecteert een hormoon in uw urine die het lichaam produceert tijdens de zwangerschap (hCG-humaan chorion gonadotropine). De hoeveelheid zwangerschapshormonen neemt toe naarmate de zwangerschap vordert.

2. Vanaf wanneer kan ik de test nemen als ik een vermoeden heb dat ik zwanger ben?

U kunt uw urine testen vanaf de eerste dag dat u uw menstruatie overslaat. U kunt de test op alle tijdstippen van de dag uitvoeren, maar als u zwanger bent, bevat de eerste ochtendurine het meeste zwangerschapshormonen.

3. Moet ik de test uitvoeren met de eerste ochtendurine?

Hoewel u de test op alle tijdstippen van de dag kunt uitvoeren, is uw eerste ochtendurine meestal de meest geconcentreerde van de dag, en bevat deze het meeste hCG.

4. Hoe nauwkeurig is de test?

In een klinische evaluatie werden de resultaten die verkregen werden met de HCG Pregnancy Rapid Test MedicAid® vergeleken met die van een andere in de handel verkrijgbare hCG-test van het urinemembraan. Tijdens de klinische test bij gebruikers werden 413 urinstalen gebruikt: in beide tests werden 117 positieve en 296 negatieve resultaten verkregen. De resultaten toonden een totale nauwkeurigheid 99% aan van de HCG Pregnancy Rapid Test MedicAid®, in vergelijking met de andere hCG-test van het urinemembraan.

5. Hoe gevoelig is de test?

HCG Pregnancy Rapid Test MedicAid® detecteert hCG in urine met een concentratie van 25 mIU/mL of hoger. De test is gestandaardiseerd volgens de internationale standaard van de W.H.O. Bij een toevoeging van LH (300 mIU/mL), FSH (1.000 mIU/mL) en TSH (1.000 µIU/mL) aan negatieve (0 mIU/mL hCG) en positieve (25 mIU/mL hCG) stalen werd geen kruisreactie waargenomen.

6. Wat moet ik doen als de resultaten aangeven dat ik zwanger ben?

Dit betekent dat uw urine hCG bevat en dat u waarschijnlijk zwanger bent. Raadpleeg uw dokter om te bevestigen dat u zwanger bent en om de stappen te bespreken die u dient te ondernemen.

7. Hoe weet ik of de test goed werd uitgevoerd?

Het verschijnen van een gekleurde lijn in het controlelijngedebied (C) duidt erop dat u de testprocedure goed gevolgd heeft, en dat de juiste hoeveelheid urine geabsorbeerd werd.

8. Wat moet ik doen als de resultaten aangeven dat ik niet zwanger ben?

Dit betekent dat er geen hCG gedetecteerd werd in uw urine, en dat u waarschijnlijk niet zwanger bent. Als uw menstruatie niet begint binnen één week na de voorziene datum, dient u de test te herhalen met een nieuwe test MedicAid®. Als u na het herhalen van de test hetzelfde resultaat verkrijgt en nog steeds niet uw menstruatie heeft, dient u uw dokter te raadplegen.

SYMBOOLINDEX

	Opgelet, zie gebruiksaanwijzingen		Tests per kit
	Alleen voor in-vitro diagnostisch gebruik		Te gebruiken voor
	Bewaren tussen 2-30°C		Partijnummer
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is		Fabrikant
	Niet hergebruiken		Catalogus #

BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

REF 854972 V4 - 05/2017



CE 0123



Schwangerschaftstest

Für Selbstdiagnose

VERFAHREN

Der HCG MedicAid® Schwangerschaftsschnelltest für die Anwendung im Urinstrahl ist ein schneller, einstufiger Immuntest zur qualitativen Erkennung von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin und der entsprechenden Feststellung einer Schwangerschaft. Der Test nutzt eine Kombination aus Antikörpern, einschließlich eines monoklonalen HCG-Antikörpers, um selektiv ein erhöhtes hCG-Niveau nachzuweisen. Die Durchführung des Tests erfolgt durch das Benetzen des hydrophilen Streifens mit Urin. Das Ergebnis wird durch die farbigen Linien angezeigt.

VORSICHTSHINWEISE

- Bitte lesen Sie alle Informationen auf dieser Packungsbeilage, bevor Sie den Test durchführen.
- Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums benutzen, das auf dem Folienbeutel aufgedruckt ist.
 - An einem trockenen Ort bei 2-30 °C aufbewahren. Nicht einfrieren.
 - Nicht benutzen, wenn die Packung eingewissen oder beschädigt ist.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Für die In-vitro-Diagnose. Nicht zum Einnehmen.
 - Den Folienbeutel mit dem MedicAid® erst öffnen, wenn der Test durchgeführt werden soll.
 - Den benutzten MedicAid® gemäß der örtlichen Vorschriften entsorgen.

PACKUNGSINHALT

1 Aluminium-Schutzhülle mit 1 Teststift und einem Entfeuchtungsbeutel; Gebrauchsanweisung.

ANLEITUNG

1. Entnehmen Sie den MedicAid® aus dem Folienbeutel und benutzen Sie ihn sofort bzw. innerhalb einer Stunde.
2. Entfernen Sie die Kappe vom MedicAid®, urinieren Sie auf den Teststreifen oder halten Sie ihn für mindestens 15 Sekunden in den in einem sauberen Behälter aufgefangenen Urin. Achten Sie darauf, dass die mit 5 Löcher Saugterseite des Streifens mit dem Urin in Kontakt kommt.
3. Bringen Sie die Kappe wieder am MedicAid® an und legen Sie den Test auf eine saubere, stabile Unterlage. Starten Sie den Timer sofort.
4. Warten Sie 3 Minuten und lesen Sie dann das Ergebnis ab. Nach Ablauf von mehr als 10 Minuten kann das Ergebnis nicht mehr verlässlich interpretiert werden.

ABLESEN DES ERGEBNISSES

SCHWANGER

Es werden deutlich zwei farbige Linien angezeigt. Eine der Linien sollte sich dabei im Kontrollbereich (C) und die andere im Testbereich (T) befinden. Es ist möglich, dass eine Linie heller ist als die andere. Die Linien müssen nicht gleichfarbig sein. Sie sind in diesem Fall wahrscheinlich schwanger.

NIET SCHWANGER

Im Kontrollbereich (C) erscheint eine farbige Linie. Im Testbereich (T) wird keine Linie angezeigt. Sie sind in diesem Fall wahrscheinlich nicht schwanger.

UNGÜLTIG

Erscheint im Kontrollbereich (C) keine farbige Linie, ist das Testergebnis ungültig, selbst wenn im Testbereich (T) eine Linie angezeigt wird. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen MedicAid®.



EINSCHRÄNKUNGEN

1. HCG-haltige Arzneimittel (wie Pregnyl, Profasi, Pergonal oder APL) können zu falschen positiven Testergebnissen führen.

1. Alkohol, oral eingenommene Verhütungsmittel, Schmerzmittel, Antibiotika und Hormontherapien, die kein hCG enthalten, sollten keinerlei Auswirkungen auf das Testergebnis haben.
2. Außer einer Schwangerschaft können auch eine Reihe von Beschwerden, wie Eierstockzysten oder eine Bauchhöhlenschwangerschaft (Schwangerschaft außerhalb des Uterus) zu einem erhöhten hCG-Niveau und somit zu einem falschen positiven Ergebnis führen.
3. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie medizinische Entscheidungen treffen.
4. Eine zu geringe Konzentration des Hormons hCG im Urin, kann zu einem falsch negativen Testergebnis führen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Wie funktioniert der MedicAid®?

Der HCG MedicAid® Schwangerschaftsschnelltest erkennt in Ihrem Urin ein Hormon, das Ihr Körper während der Schwangerschaft produziert (hCG, humanes Choriongonadotropin). Die Menge des Schwangerschaftshormons nimmt mit fortschreitender Schwangerschaft zu.

2. Wann kann ich den Test frühestens durchführen, wenn ich glaube, schwanger zu sein?

Sie können Ihren Urin am ersten Tag testen, an dem Ihre Menstruation ausbleibt. Sie können den Test zu jeder beliebigen Tageszeit durchführen. Wenn Sie schwanger sind, enthält der erste Urin am Morgen die meisten Schwangerschaftshormone.

3. Muss ich den ersten Urin am Morgen testen?

Sie können den Test zu jeder beliebigen Tageszeit durchführen. Allerdings enthält Ihr erster Urin am Morgen in der Regel die höchste Konzentration und die größte Menge an hCG.

4. Wie genau ist der Test?

Im Rahmen einer klinischen Studie wurden die mit dem HCG MedicAid® Schwangerschaftsschnelltest erzielten Ergebnisse mit anderen handelsüblichen hCG-Urinstreifen verglichen. Der klinische Verbrauchertest umfasste 413 Urinproben. Beide Tests identifizierten 117 positive und 296 negative Ergebnisse. Im Vergleich zu anderen hCG-Urinstreifen ergaben die Ergebnisse für den HCG MedicAid® Schwangerschaftsschnelltest eine Gesamtgenauigkeit von 99 %.

5. Wie empfindlich ist der Test?

Der HCG MedicAid® Schwangerschaftsschnelltest erkennt hCG im Urin bei einer Konzentration von 25 mIU/mL oder mehr. Der Test entspricht der internationalen Norm der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Zugabe von LH (300 mIU/mL), FSH (1.000 mIU/mL) und TSH (1.000 µIU/mL) zu negativen (0 mIU/mL hCG) und positiven (25 mIU/mL hCG) Proben zeigte keine Kreuzreaktion.

6. Was sollte ich tun, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich schwanger bin?

Ihr Urin enthält in diesem Fall hCG und Sie sind wahrscheinlich schwanger. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um die Schwangerschaft bestätigen und sich hinsichtlich der weiteren Schritte beraten zu lassen.

7. Woher weiß ich, dass ich den Test richtig durchgeführt habe?

Durch die farbige Linie, die im Kontrollbereich (C) erscheint, wird Ihnen angezeigt, dass Sie den Test richtig durchgeführt haben und dass eine ausreichende Menge Urin absorbiert wurde.

8. Was sollte ich tun, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich nicht schwanger bin?

In diesem Fall wurde kein hCG in Ihrem Urin festgestellt und Sie sind wahrscheinlich nicht schwanger. Wenn Ihre Menstruation innerhalb einer Woche nach Fälligkeit nicht einsetzt, sollten Sie den Schwangerschaftstest mit einem neuen MedicAid® wiederholen. Ergibt der neue Test das gleiche Ergebnis und hat Ihre Menstruation noch immer nicht eingesetzt, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.

	Achtung, siehe Bedienungsanleitung		Tests pro Packung
	Nur für die In-vitro-Diagnose		Zu verwenden bis
	Bei 2-30 °C aufbewahren		Chargennummer
	Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist		Hersteller
	Nicht wiederverwenden		Katalog-Nr.

BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

REF 854972 V4 - 05/2017



CE 0123